

Alma
For You. For Life.

— Die —
**schnellste
Behandlung
zur Laser-
Haarentfernung
auf dem
Markt!***



Soprano Titanium *Special Edition*

*Von "Sapio Research", einem unabhängigen globalen Forschungsinstitut, im Vergleich mit weltweit führenden Marken für Laser-Haarentfernung bestätigt.

Haarentfernung, optimiert.
Jetzt noch schneller.



Soprano Titanium Special Edition ist so effizient wie nie zuvor und verkürzt die Behandlungszeiten erheblich.

20%

schneller* –
das ist nicht nur eine
Verbesserung;
**das ist ein
Game Changer.**

Soprano Titanium Special Edition mit der revolutionären Alma Technologie von drei kombinierten Wellenlängen hebt das Konzept der Geschwindigkeit auf eine ganz neue Ebene. Dank dieser Plattform können Sie Ihre Patienten in kürzeren Sitzungen behandeln. Ihre Patienten werden begeistert sein und Sie profitieren von einem echten Wettbewerbsvorteil.

*Gültig im SHR-Bewegungsmodus und bei hohen Fluenzwerten.



Bereit, Ihre Ergebnisse zu **MAXimieren?**

Trio MAX ist ein revolutionärer Applikator, der Geschwindigkeit, Effizienz und ein unvergleichliches Patientenerlebnis vereint.

Dieser einzigartige Applikator bietet eine Spotgröße von 4 cm² und eine beeindruckende Steigerung der Behandlungsgeschwindigkeit von bis zu 20 %*.

Darüber hinaus sorgen der optimale optische Lichtleiter und die verbesserte Effizienz bei Behandlungen für eine noch nie dagewesene Leistung. Der Trio MAX verfügt außerdem über eine spezielle Kühlung, dank der die Behandlungen praktisch schmerzfrei sind.




Synergetische Technologien. Exzellente Ergebnisse.

SHR

Die Soprano Titanium Special Edition ist mit der patentierten SHR-Technologie von Alma ausgestattet, der praktisch schmerzfreien Methode der Laserhaarentfernung. Die einzigartige Kombination aus schrittweiser Erwärmung durch hochfrequente Impulse und starker Kühlung ermöglicht effektive und angenehme Behandlungen für alle Hauttypen.

3D – Exklusive Dreifach-Wellenlängen-Technologie

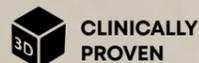

Alma Soprano kombiniert die drei optimalen Laserwellenlängen 755 nm, 810 nm und 1.064 nm in einer gleichzeitigen Emission und zielt so zugleich auf unterschiedliche Gewebetiefen und Strukturen innerhalb des Follikels ab, um maximale Ergebnisse zu erreichen.

ICE Plus™

Diese moderne Technologie kühlt die Haut kontinuierlich und ermöglicht während der gesamten Behandlung eine kontrollierte Temperatur. Die Patienten genießen eine praktisch schmerzfreie, kühle und komfortable Behandlung.



DIE WELLENLÄNGEN

755 nm

Basierend auf der Alexandrit-Wellenlänge bietet 755 nm eine starke Absorption durch das Chromophor Melanin. Dies macht sie zur idealen Wellenlänge für die Entfernung von feinem und hellerem Haar.

810 nm

Die gute Absorption in Melanin und die relativ tiefe Penetration sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Wirksamkeit.

1.064 nm

Die Wellenlänge von 1.064 nm zeichnet sich durch eine geringere Melaninabsorption aus und ist die ideale Lösung für dunklere Hauttypen. Sie bietet außerdem eine tiefe Penetration und zielt auf die Haarzwiebel und Papille des Haarfollikels ab. Durch die Absorption in Wasser und Hämoglobin erhöht die Wellenlänge von 1.064 nm das thermische Profil der gesamten Behandlung, was zu einer hochwirksamen Haarentfernung führt, insbesondere bei tief liegenden Haarfollikeln.



Verwalten Sie
Ihr Institut.

**Maximieren
Sie Ihr Potenzial.**

Smart Clinic ist ein digitales, cloudbasiertes Business-Tool, das Ihnen von jedem digitalen Endgerät aus ständigen Zugriff auf Live-Daten und Analysen ermöglicht. Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Leistung der Plattform, die Behandlungseffizienz, den ROI und mehr, um Ihr Angebot zu optimieren.



Weitere Applikatoren



TRIO - Drei in Eins

Dieser Applikator mit einer Spotgröße von 2 cm² ermöglicht ebenfalls die Abgabe von drei hochwirksamen Wellenlängen in einem und ist somit für alle Hauttypen geeignet. Er zielt gleichzeitig auf verschiedene Gewebetiefen und anatomische Strukturen innerhalb des Haarfollikels ab, was die Behandlungseffizienz erhöht.



SPEED™ 810

Der Speed 810 Applikator verfügt über eine hochwirksame und sichere Wellenlänge bei einer komfortablen Spotgröße von 2 cm².



ALEX 755

Der Alex 755 Applikator bietet eine starke Absorption, kombiniert mit kontinuierlicher Kühlung, und ermöglicht die Behandlung von hellem und feinem Haar für die Hauttypen I-V.



FACIAL TIP

Mit dem präzisen Gesichtsaufsatz lassen sich auch schwer zugängliche Bereiche wie Ohren, Nasenlöcher, Augenbrauen und Glabella mühelos behandeln.



Soprano Titanium *Special Edition*

Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der medizinischen Ästhetik und apparativen Kosmetik ermöglichen wir es Tausenden von Anwendern, Millionen von Patienten zu wirklich bemerkenswerten Veränderungen zu verhelfen. Alma ermöglicht es Ihnen, jeder Person, die in Ihr Institut kommt, die effektivste, schnellste und sicherste Behandlung zu bieten. In einer Welt, die sich ständig verändert, bleibt eine Sache konstant: Patienten müssen wissen, dass sie die bestmögliche Behandlung erhalten - vor, während und nach der Behandlung. Wenn unsere Lösung in Ihren Händen liegt, wird dieses Versprechen zur Realität.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg, Deutschland
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Fax + 49 911 / 89 11 29-99

E-mail: info@alma-lasers.de

www.alma-lasers.de

© 2024 Alma. Alle Rechte vorbehalten.
Alma, sein Logo, Soprano Titanium, TRIO, Trio MAX, ICE Plus, Smart Clinic, SHR & Speed sind Marken und/oder eingetragene Marken von Alma in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.



FOLGEN SIE
ALMA LASERS

